

A person is shown from the chest down, wearing a dark grey V-neck sweater over a white t-shirt. They are wearing a black hip belt with a grey buckle and a red pouch attached to the side. The person is sitting on a wheelchair, with their hand on the black handle. The background is a field of tall green grass.

HÜFTPOSITIONIERUNG

Die Positionierung der Hüfte ist wichtig für die korrekte Ausrichtung des Oberkörpers, des Kopfes und der Extremitäten.

DRUCK- KNOPF- VERSCHLUSS

Der neue Bodypoint® Druck-Knopf-Verschluss ist elegant und flach. Entwickelt für Komfort und Leistung, ermöglicht dieses neue Design dem Therapeuten eine Vielzahl an Möglichkeiten, welche über Jahre von verschiedenen Benutzern getestet wurden. Die patentierte Konstruktion ermöglicht ein Abnehmen der Verschlusskappe zum leichten Reinigen oder den gewünschten Verschluss zu wechseln – tatsächlich bietet sie drei Verschlussoptionen in einem Design.


Leicht • Langlebig • Flach • Leichte Reinigung • Drei Verschlussoptionen



Leichter (1/3 leichter als vergleichbare Druckknopfverschluss Modelle) mit abgerundeten Ecken, welches den Komfort erhöht und ein Hängenbleiben der Kleidung verhindert.



Verchromte Stahlkonstruktion für erhöhte Stabilität und Langlebigkeit. Flache Verschlusskappe für ein dezentes Aussehen.

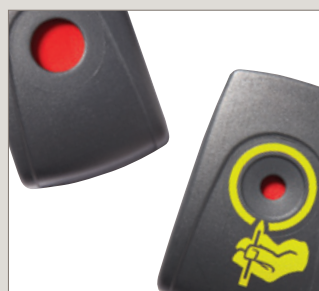

Optionale Schutzkappen: Reduzierte Schutzkappe (Ø 14 mm Druckknopf), Sicherheits-Schutz-Kappe (Ø 6 mm Druckknopf).

3-PUNKT- SICHERHEITS- VERSCHLUSS



(zum Öffnen des Verschlusses muss an 3 Punkten gedrückt werden)

WÄHLEN SIE DEN BODYPOINT® HÜFTGURT IN 5 EINFACHEN SCHRITTEN

1. WÄHLEN SIE DIE ART DES GURTES

- Gepolstert
- Ungepolstert
- Velcro-kompatibel

2. 2- ODER 4-PUNKT



2-PUNKT HÜFTGURT


Zwei Befestigungspunkte am Rollstuhl. Für Benutzer mit niedrigem Muskeltonus und Muskelschwäche geeignet.



4-PUNKT HÜFTGURT

Vier Befestigungspunkte am Rollstuhl. Die beiden primären Befestigungspunkte halten den Gurt in seiner Position wie ein 2-Punkt Gurt. Die zusätzlichen Begleitbänder verhindern, dass der Gurt sich verdreht. Dieser Gurtyp hält das Becken viel fester.

3. WÄHLEN SIE DIE VERSCHLUSSART

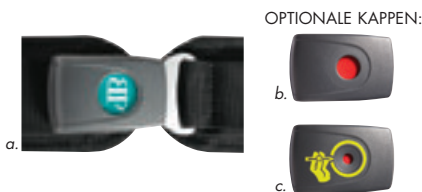

Druck-Knopf-Verschluss

Flache, glatt, abgerundete Ecken. Abnehmbare Kappen zum Wechseln der Druckknopfgröße und leichter Reinigung. Standard Verschlusskappe (a). Reduzierte Verschlusskappe (b) und Sicherheits-Schutz-Kappe (c).



Seitlicher Verschluss (SR)
Leicht, sicher



Rehab Verschluss
leicht, flach, stabil, für eingeschränkte Handfunktion



Kleiner Druckknopf-Verschluss Metall
stabil, sicher, kindergerechte Größe



Druckknopf-Sicherheitsverschluss
starker Druck gegen unabsichtliches Öffnen



3-Punkt-Sicherheitsverschluss
zum Öffnen muss an 3 Punkten gedrückt werden

4. WÄHLEN SIE DIE ZUGRICHTUNG



EINSEITIGE ANPASSUNG

Anwender: Benutzer oder Betreuer
Anpassung: Einseitige Zugrichtung von der Mitte
Verschluss: Alle Modelle verfügbar
Anwendung: Benutzer mit niedrigem Muskeltonus und Muskelschwäche



ANPASSUNG ZWEISEITIG INNEN

Anwender: Betreuer
Anpassung: Zweiseitig von außen nach innen
Verschluss: Alle Modelle verfügbar, ausgenommen kleiner Druck-Knopf-Verschluss Metall
Anwendung: Benutzer mit hohem Muskeltonus. Wirkt Hüftrotation entgegen, indem es dem Betreuer erlaubt, erst die eine Seite des Beckens zu positionieren und dann entsprechend die andere Seite.




ANPASSUNG ZWEISEITIG AUSSEN

Anwender: Benutzer oder Betreuer
Anpassung: Zweiseitig von innen nach außen
Verschluss: nur seitlicher Verschluss (SR) verfügbar
Anwendung: zur regulierbaren Anpassung

5. WÄHLEN SIE DIE GRÖSSE

Größen von XS bis L verfügbar.
Beachten Sie dazu die Maßtabelle auf der linken Seite


MASSTABELLE FÜR HÜFTGURTE

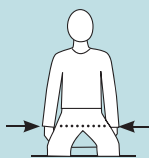

Anpassung der Gurte:

Bei Zwischenmaßen beachten Sie bitte weitere Faktoren wie Wachstum, Gewichtsveränderung oder Kleidung.

XS	5-9" (13-23 cm)
S	7-11" (18-28 cm)
M	9-15" (23-38 cm)
L	13-19" (33-48 cm)

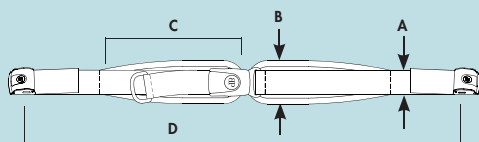

	A	B	C	D
XS	1" (25 mm)	1-3/4" (44 mm)	6" (15 cm)	50" (127 cm)
S	1-1/2" (38 mm)	2-1/4" (57 mm)	7" (18 cm)	55" (140 cm)
M	1-1/2" (38 mm)	2-1/2" (64 mm)	9" (23 cm)	60" (152 cm)
L	2" (50 mm)	3" (76 mm)	11" (28 cm)	65" (165 cm)

OPTIONALE GURTBEFESTIGUNGEN

KUNSTSTOFFSCHNALLEN (Paar)

- FS032** Breite: 25 mm
Bohrung Ø: 5 mm
- FS033** Breite: 38 mm
Bohrung Ø: 6 mm
- FS034** Breite: 50 mm
Bohrung Ø: 6 mm



ZUR FLACHEN MONTAGE

- FS112/FS122** Breite: 25 mm
- FS113/FS123** Breite: 38 mm
- FS114/FS124** Breite: 50 mm





EINSEITIG



ZWEISEITIG AUSSEN



ZWEISEITIG INNEN

2-Punkt Hüftgurte gepolstert, große Modellvielfalt

	Größe							
		Druck-Knopf Verschluss	Seitlicher Verschluss	Rehab Verschluss	kleiner Druck-Knopf Verschluss	Druck-Knopf-Sicherheitsverschluss	Druck-Knopf-Plastik	3-Punkt Sicherheitsverschluss
EINSEITIG	XS		HB215XS		HB235XS		CM102XS	CM090XS*
	S	HB205S	HB215S	HB225S		HB245S	CM102S	CM090S*
	M	HB205M	HB215M	HB225M		HB245M	CM102M	
	L	HB205L	HB215L	HB225L		HB245L		
ZWEISEITIG AUSSEN	XS		HB216XS					
	S		HB216S					
	M		HB216M					
	L		HB216L					
ZWEISEITIG INNEN	XS		HB219XS		HB239XS			
	S	HB209S	HB219S	HB229S		HB249S		
	M	HB209M	HB219M	HB229M		HB249M		

Montage-Set zur bohrungsfreien Befestigung am Rollstuhl im Lieferumfang enthalten, außer*

4-Punkt Hüftgurte gepolstert, bieten sicheren Halt

	Größe							
		Druck-Knopf Verschluss	Seitlicher Verschluss	Rehab Verschluss	kleiner Druck-Knopf Verschluss	Druck-Knopf-Sicherheitsverschluss	Druck-Knopf-Plastik	3-Punkt Sicherheitsverschluss
EINSEITIG	XS		HB415XS		HB435XS		CM103XS	CM091XS*
	S	HB405S	HB415S	HB425S		HB445S		CM091S*
	M	HB405M	HB415M	HB425M		HB445M		
	L	HB405L	HB415L	HB425L		HB445L		
ZWEISEITIG AUSSEN	XS		HB416XS					
	S		HB416S					
	M		HB416M					
	L		HB416L					
ZWEISEITIG INNEN	XS		HB419XS		HB439XS			
	S	HB409S	HB419S	HB429S		HB449S		
	M	HB409M	HB419M	HB429M		HB449M		

Montage-Set zur bohrungsfreien Befestigung am Rollstuhl im Lieferumfang enthalten, außer*

VELCRO-KOMPATIBLE HÜFTGURTE




Präzise Positionierung der SUB-ASIS-Polster mittels Velcro-Klettband. In Verbindung mit dem Velcro-kompatiblen Hüftgurt gewähren die beiden ASIS-Polster feste Druckpunkte auf den Hüftknochen. Das Resultat ist eine wesentlich verbesserte Sitz-Stabilität sowie Kontrolle der Hüftrotation.

SUB-ASIS GURTPOLSTER

Die Polster, gefüllt mit SynerGel™, gewähren ausreichend Freiraum am Abdomen und verringern den Druck auf die Blase.

PD402 XS/S

PD401 M/L

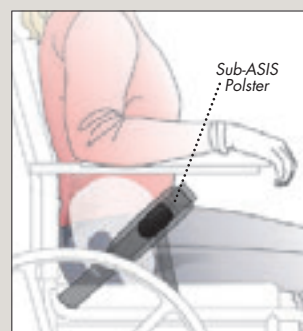

		Größe	Druckknopf-Verschluss	Seitlicher Verschluss	Rehab Verschluss	Kleiner Druckknopf-Verschluss
2-PUNKT	Einseitige Anpassung	M	LB205M ¹		LB225M	
		L			LB225L	
	Zweiseitig innen	M			LB229M	
4-PUNKT	Einseitige Anpassung	XS				LB435XS ³
		M	LB405M ¹		LB425M	
		L	LB405L ²		LB425L	
	Zweiseitig Aussen	XS		LB416XS		
	Zweiseitig innen	M			LB429M	

¹passend für FS018D reduzierte Verschlusskappe und FS018C Sicherheitsverschlusskappe.

²passend für FS019D reduzierte Verschlusskappe und FS019C Sicherheitsverschlusskappe.

³passend für FS029C Sicherheitsverschlusskappe XS.

UNGEPOLSTERTE HÜFTGURTE

AUFSCHIEBEPOLSTER

sinnvolle Ergänzung für vorhandene Hüft, Leisten- und Schultergurte

PD304 Small

Gurtbreite: 1" (25 mm)

Gurtlänge: 8" (20 cm)

PD305 Medium

Gurtbreite: 1-1/2" (38 mm)

Gurtlänge: 10" (25 cm)

PD306 Large

Gurtbreite: 2" (50 mm)

Gurtlänge: 12" (30 cm)



		Größe	Druckknopf-Verschluss	Seitlicher Verschluss	Rehab Verschluss	Druckknopf-Sicherheitsverschl.
Einseitige Anpassung	XS			NB215XS		
	M	NB205M ¹		NB215M	NB225M	NB245M
	L	NB205L ²		NB215L	NB225L	NB245L ³
Einseitige Anpassung mit Daumenschlaufe	L				NB225L-T	

¹Passend für FS018D reduzierte Verschlusskappe und FS018C Sicherheitsverschlusskappe.

²Passend für FS019D reduzierte Verschlusskappe und FS019C Sicherheitsverschlusskappe.

CLICKIT® UND FIXIT™ SCHNELLVERSCHLUSS

Zum Befestigen von Rücken, Sitzplatten, etc. für 22 mm und 25 mm Bohrdurchmesser geeignet.

CLICKIT®



Patent 5,683,201

FIXIT™



Patent 5,683,201

NEU

OPTIONALE DRUCK-KNOPF-SCHUTZ-KAPPEN



REDUZIERTE SCHUTZKAPPE

FS018D 1-1/2", Ø14 mm Druckknopf
Für Gurte in Größe S und M geeignet.
FS019D 2", Ø14 mm Druckknopf
Für Gurte in Größe L geeignet.



SICHERHEITS-SCHUTZ-KAPPE

FS018C 1-1/2", Ø6 mm
Druckknopf
Für Gurte in Größe S und M geeignet.
FS019C 2", Ø6 mm Druckknopf
Für Gurte in Größe L geeignet.



XS SICHERHEITS-SCHUTZ-KAPPE

Zum Aufbringen auf den kleinen Druck-Knopf-Verschluss Metall.
Geöffnet wird das Schloss durch eine kleine Öffnung in der Kappe mit einem schmalen Gegenstand wie z. B. Bleistift oder Kugelschreiber.
FS029C



SICHERHEITS-SCHUTZ-KAPPE

Zum Aufklipsen auf den alten Druck-Knopf-Verschluss Metall (PB) (nicht passend für den neuen Druckknopfverschluss).
FS025C-1

PIVOT-MOUNT GURT

Erlaubt die direkte Montage an feste Oberflächen, benötigt wird eine 1/4" (6 mm) Bohrung.




Rehab Verschluss
SB225M *Medium*
SB225L *Large*
SB225XL *Extra Large*

Kleiner Druck-Knopf-Verschluss
SB235XS *Extra Small*

BODYPOINT® HIP GRIP™ für dynamische Beckenstabilität

Hip Grip™ ist ein innovatives, dynamisches Beckenstabilisierungssystem, das dem Rollstuhlfahrer Beckenstabilität bietet und gleichzeitig funktionale Beckenbewegungen zulässt. Der Hip Grip™ ermöglicht es,

dass das Becken sein natürliches Bewegungsausmaß nach vorne und nach hinten durchführen kann, wobei Hip Grip™ variablen Widerstand bietet, so dass das Becken wieder in seine neutrale Position zurückkehrt. Die Kombination der verbesserten Beckenpositionierung und der dynamischen Beckenbewegungen verbessert die Sitzhaltung und ermöglicht verbesserte funktionelle Aktivitäten, wie das Erreichen eines Gegenstands oder das Fortbewegen des Rollstuhls. In klinischen Studien haben Patienten eine Verbesserung ihrer Reichweite und ihres Bewegungsradius erfahren.

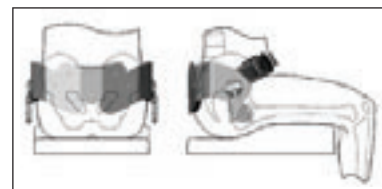


LEISTENGURT

Die Beine werden an der Innenseite des Schenkels gehalten. Dieser Gurt bietet sicheren Halt ohne Beeinträchtigung der Genitalien und ist eine zeitgemäße und komfortable Alternative für Sitzhosen.

LH600S	<i>Small</i>	9"	(23 cm)
LH600M	<i>Medium</i>	13"	(33 cm)
LH600L	<i>Large</i>	15"	(38 cm)



MASSTABELLE FÜR LEISTENGURT

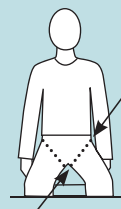

Messung zwischen äußere Hüfte und Innenseite Oberschenkel.

S	8-11" (20-28 cm)
M	11-14" (28-36 cm)
L	14-16" (36-41 cm)