



OBERKÖRPERPOSTIONIERUNG

Die korrekte Positionierung ist Grundlage für die Teilnahme an allen täglichen Aktivitäten. Sie ist wichtig für eine gute Atmung und Kopfhaltung.





Weiches, elastisches und zugleich festes Material sorgt für Bewegungsfreiheit sowie sichere Positionierung.

Das von Bodypoint® entwickelte Stretchmaterial bietet kontrollierte Dehnung für Bewegung.

Beweglicher Schnellverschluss, Anpassung an unterschiedliche Voraussetzungen. Die flache Gurtschnalle verhindert unbeabsichtigtes Öffnen.

Stabilisierendes Untergewebe begrenzt die Ausdehnung.

STAYFLEX™ SCHMETTER- LINGSWESTE

(MIT UND OHNE REISSVERSCHLUSS)

Die STAYFLEX™ SCHMETTERLINGSWESTE ist an die Anatomie des Oberkörpers angepasst. Das patentierte Design ist gerade dann von großer Bedeutung, wenn der Patient dazu neigt, nach vorne zu kippen. Das zentrale, dem Sternum angepasste längliche Mittelteil hält den Oberkörper in aufrechter Position. Der Reißverschluss vorn in der Mitte erlaubt schnelles An- und Ablegen. Die Stayflex™ Schmetterlingsweste gibt es in 2 Ausführungen: eine schmale (Trimline- für Mädchen und Frauen) und eine breite.




Weiches, elastisches und zugleich festes Material sorgt für Bewegungsfreiheit sowie sichere Positionierung.




Die rückseitige Anpassung ist ideal für breitere Rollstuhlrücken oder wenn man den Verschluss oder die Anpassung vom Benutzer weg haben möchte.



Stabilisierendes Untergewebe begrenzt die Ausdehnung und das Hochrutschen.


STANDARD STAYFLEX™		Vorderseitige Anpassung		Rückseitige Anpassung		Lange Gurtbänder	
	Größe	mit Reißverschluss	ohne Reißverschluss	mit Reißverschluss	ohne Reißverschluss	mit Reißverschluss	ohne Reißverschluss
	XS		SH311XS		SH321XS		CM080XS
	S	SH310S	SH311S	SH320S	SH321S	CM078S	CM080S
	M	SH310M	SH311M	SH320M	SH321M	CM078M	CM080M
	L	SH310L	SH311L	SH320L	SH321L	CM078L	CM080L
	XL	SH310XL	SH311XL	SH320XL	SH321XL		

TRIMFLEX™		Vorderseitige Anpassung		Rückseitige Anpassung		Lange Gurtbänder	
	Größe	mit Reißverschluss	ohne Reißverschluss	mit Reißverschluss	ohne Reißverschluss	mit Reißverschluss	ohne Reißverschluss
	M	SH330M	SH331M	SH340M	SH341M	CM079M	
	L	SH330L	SH331L	SH340L	SH341L	CM079L	
	XL	SH330XL	SH331XL	SH340XL	SH341XL		


Ausführung mit langen Gurtbändern, statt der üblichen Fixierung für die Montage an Sitzschalen oder Rehabuggys.

MASSTABELLE FÜR STAYFLEX™ UND SCHULTERGURTE

Messen Sie die Schulterbreite. Bei Zwischenmaßen beachten Sie bitte weitere Faktoren wie Wachstum, Gewichtsänderung oder Kleidung.

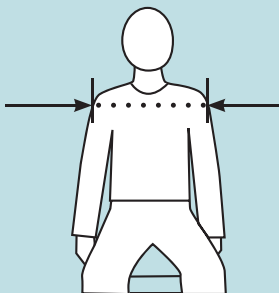


XS	9-1/2 - 11" (24 - 28 cm)
S	11 - 13" (28 - 33 cm)
M	13 - 16" (33 - 41 cm)
L	16 - 19" (41 - 48 cm)
XL	19 - 22" (48 - 56 cm)

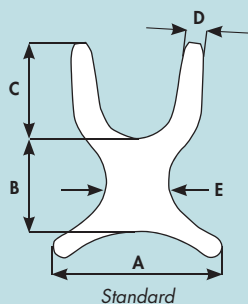

STANDARD STAYFLEX™

Größe	A	B	C	D	E
XS	1-1/4" (22cm)	5 (13mm)	5-1/4 (13mm)	1-1/2 (4mm)	3-3/4 (9mm)
S	9" (23cm)	5-1/2" (14cm)	6-1/2" (16cm)	1-3/4" (4cm)	4-3/4" (12cm)
M	12" (30cm)	7" (18cm)	8" (20cm)	1-3/4" (4cm)	5" (13cm)
L	15" (38cm)	8-1/2" (21cm)	9" (23cm)	2-1/4" (6cm)	5-1/4" (13cm)
XL	18" (46cm)	10" (25cm)	10-1/2" (27cm)	2-1/4" (6cm)	6-1/2" (16cm)

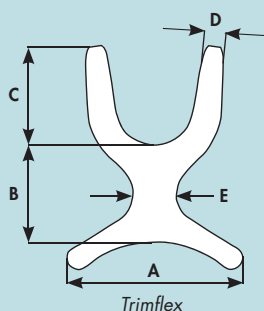

TRIMFLEX™

Größe	A	B	C	D	E
M	12" (30.5cm)	7" (18cm)	8" (20.5cm)	1-3/4" (4cm)	3-1/2" (9cm)
L	15" (38cm)	8-1/2" (21.5cm)	9" (23cm)	2-1/4" (6cm)	3-1/2" (10cm)
XL	18" (46cm)	10" (25.5cm)	10-1/2" (27cm)	2-1/4" (6cm)	3-3/4" (10cm)

ANPASSUNGSOPTIONEN FÜR STAYFLEX™ UND SCHULTERGURTE

RÜCKSEITIG



NEUE RÜCKSEITIGE OPTION

Rückseitige Anpassung ist ideal für breitere Rollstuhlrücken oder wenn man den Verschluss oder die Anpassung vom Benutzer weg haben möchte.

OPTIONALE KONFIGURATION



Die beeinhalteten Seitlichen Verschlüsse (SR) können entfernt werden. Stattdessen können Klappschnallen an der Rückenlehne befestigt werden. Es ermöglicht eine Verlängerung des Bandes.

VORDERSEITIG



Vorderseitige Anpassung bietet die größte Stabilität. Der Benutzer kann während der Positionierung leichter von vorne gesichert werden.

STANDARD

Standard-Schultergurte haben ein einstellbares Sternumband und garantieren dadurch einen sicheren Halt.

Größe	Polsterlänge	Vorderseitig	Rückseitig	mit langen Bändern
S	12" (31 cm)	SH210S	SH220S	CM076S
M	13-1/2" (34 cm)	SH210M	SH220M	CM076M
L	16" (41 cm)	SH210L	SH220L	CM076L
XL	18-1/2" (47 cm)	SH219XL	SH220XL	CM076XL

TRIMLINE

bestehen aus zwei gepolsterten Gurten und bieten verschiedene Montage-Optionen. Sie gewähren dem Benutzer den höchsten Grad an Freiheit.

Größe	Polsterlänge	Vorderseitig	Rückseitig
S	18-1/2" (47 cm)	SH230S	SH240S
M	11-1/2" (29 cm)	SH230M	SH240M
L	13-1/2" (34 cm)	SH230L	SH240L



CROSSOVER-MONTAGE

Komfortable Anpassung bei maximaler Stabilität.

RUCKSACK-MONTAGE

Freie Atmung bei Stabilisierung der Schultern und des Oberkörpers.

MEHR SICHERHEIT IM BAD mit dem Bodypoint® Aqua-Belt



AQUA-BELT

Die meisten Duschstühle sind ohne Sicherheitsgurte ausgestattet. Daher hat Bodypoint® den Aqua-Belt entwickelt. Er verhindert zuverlässig unbeabsichtigtes Abrutschen vom Dusch- und Toilettenstuhl. Der Aqua-Belt besteht aus wasser- und luftdurchlässigem Abstandsgewirke (Aeromesh™). Das weiche, hautfreundliche und komfortable Material fühlt sich angenehm an und trocknet innerhalb kurzer Zeit.

Der flexible Gurt kann sowohl um den Oberkörper als auch um die Beine angelegt werden und verhindert somit das Vor- oder Seitwärtsfallen.

Ein Schnellverschluss erleichtert dem Pflegepersonal die Handhabung.

BB101M-22-1

Medium (22 mm Klammern)

BB101M-25-1

Medium (25 mm Klammern)


BB101L-22-1

Large (22 mm Klammern)

BB101L-25-1

Large (25 mm Klammern)

Wasser- und luftdurchlässiges Aeromesh™ Material.

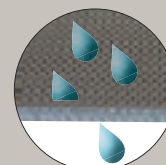




MONOFLEX™

Ermöglicht eine gleichzeitig sichere und dynamische Oberkörperstabilisierung. Das weiche, komfortable Material gibt Sicherheit und Bewegungsfreiheit. Einfaches Anpassen und Öffnen durch seitliche Clip-Verschlüsse.

Größe	Breite	Höhe	
XS	12-1/4" (31 cm)	3" (76 mm)	SH103XS
S	15-1/2" (39 cm)	3-1/2" (89 mm)	SH103S
M	18-1/4" (46 cm)	4" (10 cm)	SH103M
L	21-1/2" (55 cm)	4-1/2" (12 cm)	SH103L
XL	24-1/2" (62 cm)	5" (13 cm)	SH103XL

MONOFLEX™ MASSTABELLE

Messen Sie den Oberkörper von der einen Seite zur anderen bis zu den Armen. Wählen Sie die Größe des Polsters (siehe Tabelle oben). Das Polster soll den Brustbereich und die Seiten abdecken. Die Lücke zwischen Polster und Rückenrohr wird durch ein beidseitig verstellbares Band (Schnallen) abgedeckt.

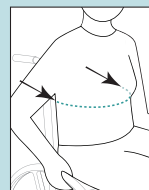

Größe	Min./Max. Anpassungsbereich
XS	114- 17-1/2" (36 - 45 cm)
S	18- 21-1/2" (46 - 55 cm)
M	22- 25-1/2" (56 - 65 cm)
L	26- 29-1/2" (66 - 75 cm)
XL	30- 33-1/2" (76 - 85 cm)



ELASTISCHES UNIVERSALBAND

Leicht anzubringen und vielseitig verwendbar: Es eignet sich als Positionierungshilfe für Benutzer und Therapeuten. Das Band kann auch zur flexiblen Fixierung der Oberschenkel benutzt werden. Die verstärkte Daumenschleife ermöglicht die einfache Handhabung auch mit eingeschränkter Handfunktion.

SP110S Small 7,5 x 152 cm

SP110L Large 11 x 152 cm



BRUSTGURT

Der BP Brustgurt hat einen Klett-Verschluss mit Daumenschleife aus Leder. Geeignet für Benutzer mit eingeschränkter Funktion.

Länge: 46" (117 cm)

Gurtbreite: 2" (50 mm)

SH102