

Elektro-Rollstuhl *FreedomChair*

Faltbar & Leicht



Freude am Leben

Dort sein,
wo es am
Schönsten
ist



Werden Sie wieder mobil und unabhängig.



FreedomChair A08L mit Stockhalter und Anhänger

Reisen
ist wieder
möglich

Der *FreedomChair* macht es möglich. Diesen Elektro-Rollstuhl können Sie in nur einer Sekunde zusammenfallen und ganz leicht ins Auto heben. Am Zielort einfach auseinanderklappen und schon können Sie losfahren. Auch Bahn-, Schiffs- und Flugreisen sind damit problemlos möglich.

So einfach ist Unabhängigkeit.



Gut fahrbar auch auf unasphaltierten Wegen

Elektro-Rollstuhl

FreedomChair



In einer
Sekunde
gefaltet
und leicht
verstaut

Alle Vorteile auf einen Blick

- In nur einer Sekunde gefaltet und leicht verstaut
- Reichweite bis zu 45 km
- Rahmen aus leichtem Flugzeug-Aluminium
- Passt in jedes Auto
- Steuerung für Links- oder Rechtshänder
- Von Begleitperson steuerbar
- Perfekt für Flug-, Schiffs- und Bahnreisen
- Große Modellauswahl
- ab 22 kg

Leicht & schnell faltbar

1



2



3



Alle Modelle im Überblick



FreedomChair A08L

Der Starke

Der A08L verbindet alle Vorzüge des FreedomChair. Die großen Räder und die sehr hohe Steigfähigkeit machen den A08L zum perfekten Begleiter im Außenbereich – auch im unebenen Gelände. Er kann mit 3 Batterien bestückt werden und erreicht damit eine Reichweite von bis zu 45 km. Zusätzlich kann man beim A08L einen Anhänger verwenden.


Die Welt
der faltbaren
Elektro-
Rollstühle

160
kg

Nutzer-
gewicht

45
km

Reich-
weite

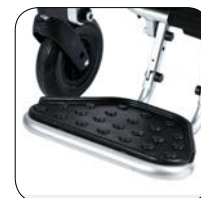

FreedomChair A08L-Set Die Vollausrüstung

Den A08L bekommen Sie mit folgender Zusatzausrüstung zu einem attraktiven Setpreis:

- höhenverstellbare Fußstütze
- Fahrpulthalterung für Begleitperson
- 3 Batterien
- stärkeres Ladegerät
- externes Ladekabel
- Gepäckanhänger
- Stockhalter
- Handy- und Getränkehalter





FreedomChair
A06L

25 kg
Eigen-
gewicht

30 km
Reich-
weite

Der Komfortable

Die A06-Serie verbindet geringes Gewicht mit großzügiger Sitzfläche und Komfort. Mit den großen Rädern fahren Sie bequem auch auf unebenen Wegen im Freien.



23 kg
Eigen-
gewicht

FreedomChair **A06**

Der Wendige

Mit nur 23kg Eigengewicht und den kleinen Rädern ist er sehr wendig. So bewegen Sie sich nicht nur unbeschwert durch die eigenen vier Wände, sondern auch flott durch die Stadt.



22 kg
Eigen-
gewicht



FreedomChair
A07

Der Leichte

Der A07 ist mit 22kg der kleinste und wendigste FreedomChair und besonders für zart gebaute Nutzer geeignet. Mit nur 56 cm Außenbreite fahren Sie auch durch die schmalsten Türen.

FreedomChair

A09

Der XL-Rollstuhl

Der A09 ist der elektrische
Falt-Rollstuhl für sehr große und
schwergewichtige Menschen.
Maximale Steigfähigkeit, eine
Reichweite bis 60 km (mit drei
Batterien) und eine Tragfähigkeit
bis 227 kg machen ihn zu
einem sicheren Begleiter im
Alltag und auf Reisen.



227
kg

Nutzer-
gewicht

60
km

Reich-
weite



FreedomChair

T3

Der Praktische

Der T3 verbindet die Vorteile eines
Standard-Rollstuhls mit jenen
eines faltbaren Elektro-Rollstuhls.
Seitlich gefaltet lässt er sich leicht
schieben und leicht verstauen.
Die Rückenlehne, die Armlehne
und das Fußbrett des T3 sind
verstellbar. So kann er perfekt an
die persönlichen Bedürfnisse
angepasst werden.



25
kg

Eigen-
gewicht

Zubehör



Stockhalter

Wichtig für die sichere und solide Verwahrung Ihres Gehstocks oder Ihrer Krücken.



Handy- und Getränkehalter

Mit der praktischen Halterung haben Sie Ihr Handy, Getränkedosen oder kleine Flaschen immer griffbereit.



Fahrpulhalterung für Begleitperson

Hilfreiches Adapter-Set zur Anbringung der Steuerung für die Begleitperson an der Rückenlehne.



Anhänger für den A08L

Der Anhänger ermöglicht es, Gepäck mitzuführen bzw. einer Begleitperson mitzufahren.



Zusatzbatterien

Mehr Reichweite durch Zusatz einer 2. bzw. 3. hochmodernen und sicheren Li-Ionen-Batterie. Inkl. Verbindungskabel zur gleichzeitigen Nutzung aller Batterien.



Ladegerät

Mit dem alternativen 5A-Ladegerät hat man die Möglichkeit die Batterien schneller zu laden.



Reisetasche

Die zweckmäßige Reisetasche erleichtert den Transport und schützt Ihren *FreedomChair* vor Kratzern und Beschädigungen.



Kopfstütze

Die Kopfstütze ist mehrfach verstellbar und für Personen geeignet, die einen zusätzlichen Halt für den Kopf benötigen.

Technische Daten

	A09	A08L-Set	A08L	A06L	A06	A07	T3
Gesamtlänge	128 cm	106 cm	106 cm	99 cm	100 cm	92 cm	103 cm
Gesamtbreite	66 cm	62 cm	62 cm	63 cm	59 cm	56 cm	62 cm
Gesamthöhe	103 cm	91 - 111 cm	91 - 111 cm	95 cm	95 cm	93 cm	97 cm
Gesamtgewicht	45 kg	30 kg	25 kg	25 kg	23 kg	22 kg	25 kg
Sitztiefe	50 cm	44 cm	44 cm	43 cm	43 cm	42 cm	44 cm
Sitzbreite	50 cm	45 cm	45 cm	44 cm	44 cm	40 cm	45 cm
Unterschenkellänge	50 cm	44/42 cm	44/42 cm	40/43 cm	45 cm	39 cm	46/43/40 cm
Sitzhöhe	53 cm	53 cm	53 cm	52 cm	52 cm	49 cm	49 cm
Maße gefaltet in cm	66 x 52 x 83	62 x 76 x 46	62 x 76 x 46	63 x 45 x 75	59 x 72 x 38	56 x 68 x 45	79 x 36 x 78
Max. Nutzergewicht	227 kg	160 kg	160 kg	160 kg	110 kg	110 kg	120 kg
Vorderrad	9 Zoll Luft	8 Zoll PU	8 Zoll PU	8 Zoll PU	8 Zoll PU	8 Zoll PU	8 Zoll PU
Hinterrad	13 Zoll Luft	12 Zoll PU / Luft	12 Zoll PU / Luft	12 Zoll PU / Luft	10 Zoll PU	10 Zoll PU	12 Zoll PU / Luft
Reichweite (abhängig von Batterieanzahl)	ca. 20 - 60 km	ca. 45 km	ca. 15 - 45 km	ca. 15 - 30 km	ca. 15 - 30 km	ca. 15 - 30 km	ca. 11 - 22 km
Steigfähigkeit max.	14°/25 %	14°/25 %	14°/25 %	14°/25 %	8°/14 %	10°/18 %	10°/18 %
Lithium-Ionen Batterien	1 x 24 V 20Ah 2.+3. Batterie optional	3 x 24 V 10Ah	1 x 24 V 10Ah 2.+3. Batterie optional	1 x 24 V 10Ah 2. Batterie optional	1 x 24 V 10Ah 2. Batterie optional	1 x 24 V 10Ah 2. Batterie optional	1 x 24 V 7,5 Ah 2. Batterie optional
Ladegerät	5A	5A	2A	2A	2A	2A	2A
Ladezeit	Pro Amperestunde (Ah) der Batterie und Ampere (A) des Ladegerätes eine Stunde. Für eine 10 Ah Batterie braucht ein 2 A Ladegerät 5 Stunden. Für 3 Batterien à 10 Ah (gesamt 30 Ah) benötigt das 2 A Ladegerät somit 15 Stunden und das 5 A Ladegerät 6 Stunden.						
Bürstenlose Elektro-Motoren	2 x 400 Watt	2 x 250 Watt	2 x 250 Watt	2 x 250 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 250 Watt
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h bis 8 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h
Material Rahmen	Aluminium						
Bremssystem	automatische Magnetbremse, intelligentes, elektronisches, regeneratives Scheibenbremssystem						
Farbe	Rahmen silber, Bespannung/Polster schwarz						
Abnehmbare Motoren	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Zusatzbatterien	optional	2 Stück inkludiert	optional	optional	optional	optional	optional
Höhenverstellbare Fußstütze	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fahrpult links und rechts montierbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fahrpulhalterung für Begleitperson	Nein	Ja	optional	optional	optional	optional	Nein
Adapter um die Batterien außerhalb des Gerätes zu laden	Nein	Ja	optional	optional	optional	optional	optional

Ihr Fachhändler:



Freude am Leben